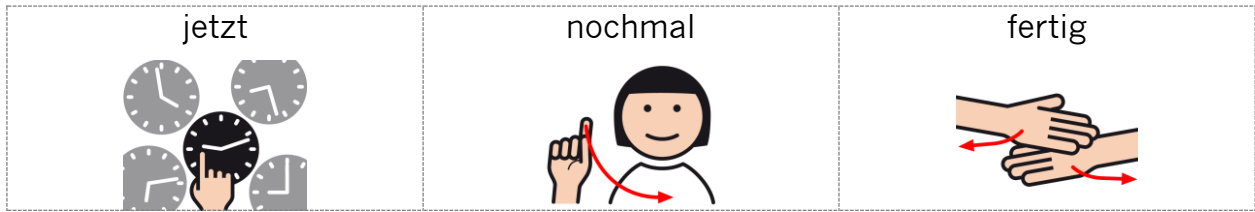



PRD-WÖRTER DES MONATS

jetzt – nochmal – fertig


METACOM-SYMBOLE



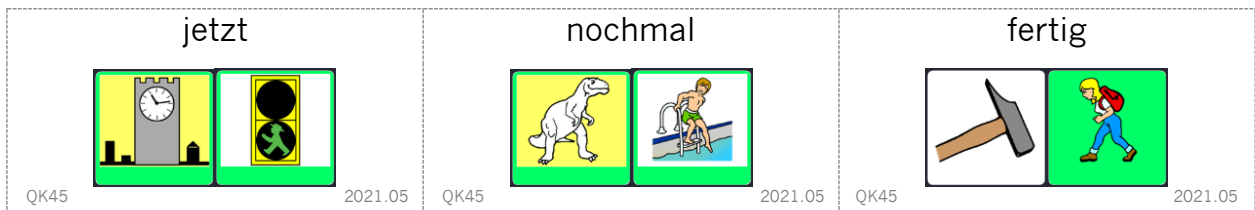
QUASSELKISTE 45




QUASSELKISTE 45 METACOM

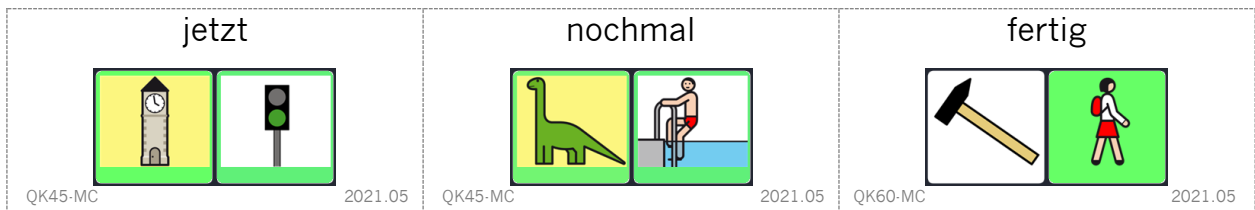

QUASSELKISTE 60

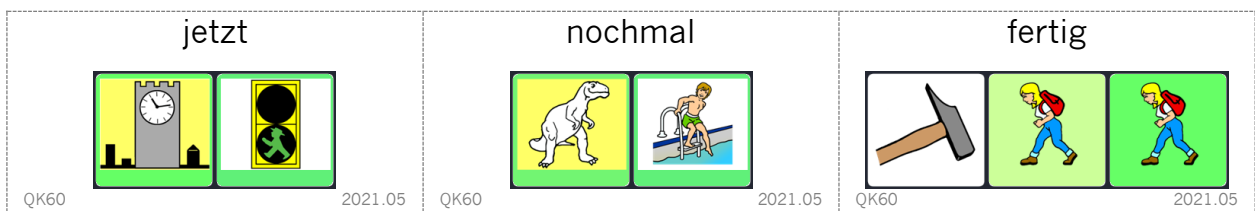

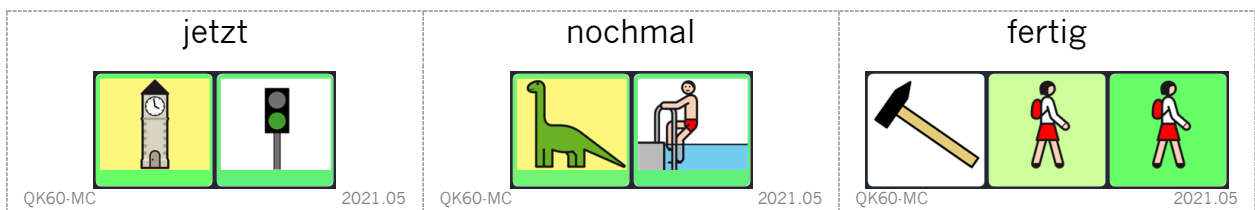


QUASSELKISTE 60 METACOM

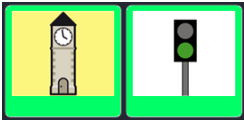




PRD-WÖRTER DES MONATS


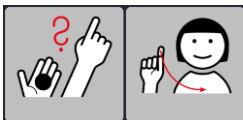

WORTSTRATEGIE 84

jetzt	nochmal	fertig
		
WS84 2021.05	WS84 2021.05	WS84 2021.05




WORTSTRATEGIE 84 METOCOM

jetzt	nochmal	fertig
		
WS84-MC 2021.05	WS84-MC 2021.05	WS84-MC 2021.05



LOGOFOXX 32

jetzt	nochmal	fertig
		
LF32 2021.05	LF32 2021.05	LF32 2021.05

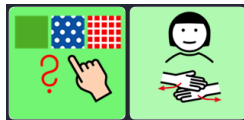


LOGOFOXX 60

jetzt	nochmal	fertig
		
LF60 2021.05	LF60 2021.05	LF60 2021.05

METATALK DE 5X9

jetzt	nochmal	fertig
		
MTT5X9 2021.05	MTT5X9 2021.05	MTT5X9 2021.05

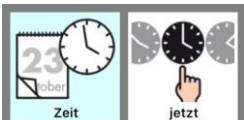METATALK DE 6X11

jetzt	nochmal	fertig
		
MTT6X11 2021.05	MTT6X11 2021.05	MTT6X11 2021.05

PRD-WÖRTER DES MONATS

jetzt – nochmal – fertig

INTERAKTION STEUERN /MEHRWORTÄUSSERUNGEN IM ALLTAG

Verwenden Sie die Zielwörter bei verschiedenen Tätigkeiten und Spielaktivitäten in Mehrwortäußerungen: z.B. „jetzt ich“, „jetzt du“, „ich möchte nochmal“, „ich bin fertig“.

BRETT- UND WÜRFELSPIELE (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 4)

Die Spiele „Valentins-Bingo“, „Schneemann-Würfeln“ und „Österliches Mensch ärgere dich nicht“ eignen sich alle zum Einsatz der Wörter „nochmal“ und „fertig“.

„KINN ZU KNIE“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 8 TIPP 2)

Schaffen die Spielteilnehmer bei dieser Bewegungsaktivität „nochmal“ die ein oder andere Verrenkung? Welche Körperteile sind „jetzt“ dran? Die verschiedenen Aufgaben können dann mit einem „fertig“ beendet werden.

„BILD MALEN“, „SPIEL AUF DEM AUTOTEPPICH“, SPIELKOMMANDOS GEBEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB2 E, 3D, 4B)

Bei diesen Spielen kann der Benutzer Handlungen kommentieren und den Handlungsverlauf mit den Wörtern „nochmal“ und „fertig“ beeinflussen.

„RATESPIELE“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB4 C)

Der Benutzer kann die Antworten seiner Mitspieler kommentieren („nochmal anders“, „nochmal nachdenken“, „überlegt nochmal“).

„DAS IST NICHT GENUG!“ (PRD-IDEE NOVEMBER 2012)

In dem bekannten Kinderbuch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ ist die Raupe sehr hungrig und sagt immer wieder „das ist nicht genug“. Ergänzen Sie Mehrwortäußerungen wie „jetzt essen“ oder „jetzt noch mehr essen“, „nochmal essen“, „mehr essen“.

„FRÜHSPORT“ (PRD-IDEE DES MONATS JULI 2013)

Starten Sie mit einer kleinen Sport-Einheit in den Tag. Es gibt verschiedene Übungen, die „jetzt schnell“, „jetzt langsam“ oder „nochmal schnell“ ausgeführt werden können.

„WELCHE FARBE DARF ES SEIN?“ (PRD-IDEE DES MONATS DEZEMBER 2014)

Beim Auswählen von Farben in verschiedenen Aktivitäten können die Wörter „jetzt“ und „nochmal“ in Mehrwortäußerungen genutzt werden, z.B. „jetzt grün“, „jetzt bitte blau“, „jetzt nochmal grün“.

„AB IN DEN GARTEN“ (PRD-IDEE DES MONATS MAI 2015) UND „AUF DIE FARBE KOMMT ES AN!“ (PRD-IDEE DES MONATS MÄRZ 2017)

Setzen Sie bei gemeinsamen Wettspielen oder den oben genannten Bewegungsspielen die Wörter „jetzt“ als Startzeichen und „fertig“ als Stoppzeichen ein.