

# LOGOFOXX 60

## BEGLEITHEFT FÜR EINWEISUNGEN UND SEMINARE



prentke romich deutschland  
weil jede:r was zu sagen hat!

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>MÖGLICHKEITEN VON LOGOFOXX 60</b>	<b>3</b>
AUFBAU DER STARTSEITE .....	4
AUFBAU DER THEMENSEITEN .....	5
TASTEN, THEMENFELDER UND BEISPIELWÖRTER .....	6
TÄTIGKEITSWÖRTER (VERBEN) .....	7
EIGENSCHAFTSWÖRTER (ADJEKTIVE) .....	9
HAUPTWÖRTER (NOMEN) .....	10
BEISPIELSÄTZE MIT SYMBOLEN .....	11
BEISPIELSÄTZE MIT TEXT .....	12
<b>HILFESTELLUNGEN FÜR DEN BENUTZER</b>	<b>13</b>
KURZE SÄTZE UND KOMMENTARE .....	13
ERZÄHLEN MIT SPRACHAUFNAHMEN .....	14
INTERAKTIONSTEUERENDE WÖRTER UND AUSSAGEN .....	15
FREI KOMBINIERTER AUSSAGEN .....	16
WORTSCHATZERWEITERUNG DURCH ANTWORTALTERNATIVEN .....	17
WÖRTER FINDEN ZUM BESCHREIBEN .....	18
<b>INDIVIDUELLE ERWEITERUNGEN</b>	<b>19</b>
VERÄNDERUNGEN AUF DEM NOVACHAT VORNEHMEN .....	19
Editiermodus ein- und ausschalten .....	19
Tasten bearbeiten und neue Tasten erstellen .....	19
Tasten anordnen .....	20
Tasten entfernen .....	20
Tasten anzeigen und verbergen .....	20
Aussprache einzelner Wörter korrigieren .....	20
Datensicherung durch duplizieren .....	21
VERÄNDERUNGEN AUF DEM ACCENT VORNEHMEN .....	22
<b>PRD ONLINE</b>	<b>24</b>

LoGoFoXX ist ein Warenzeichen der Prentke Romich GmbH.

NovaChat ist ein Warenzeichen der Saltillo Corporation.

METACOM ist ein Warenzeichen von Annette Kitzinger.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Werkes sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig. Eine Haftung für Schäden, die sich aus der Verwendung der veröffentlichten Inhalte ergeben, ist ausgeschlossen.

© Prentke Romich GmbH 2024



#### Prentke Romich GmbH

Karthäuserstraße. 3

D - 34117 Kassel

Tel. (05 61) 7 85 59-0

Fax (05 61) 7 85 59-29

E-Mail [info@prentke-romich.de](mailto:info@prentke-romich.de)

Web [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de)

# MÖGLICHKEITEN VON LOGOFOX 60

Die LoGoFoXX-Programme bieten mit den beliebten METACOM-Symbolen, dem ausgewogenen Wortschatz und der klaren Struktur, die viel Platz für persönliche Erweiterungen lässt, eine optimale Grundlage für die individuelle Kommunikationsförderung.

LoGoFoXX 60 besteht aus Seiten mit jeweils 60 Feldern. Innerhalb der Themenbereiche sind Wörter verschiedener Wortarten überwiegend so angeordnet, dass in Leserichtung bereits einfache Mehrwortäußerungen und Sätze gebildet werden können. Umfangreiche Grammatikoptionen ermöglichen das Abwandeln der Grundformen (z.B. Mehrzahl, Steigerungsformen, Zeitformen), um die in der gesprochenen Sprache am häufigsten verwendeten Formen von Nomen, Verben, Adjektiven und Pronomen zu bilden.

Um flexibel und selbstbestimmt kommunizieren zu können, benötigen wir in erster Linie einzelne Wörter. Als sinnvolle Ergänzung dazu sind in LoGoFoXX 60 auch Phrasen, Floskeln und persönliche Sätze gespeichert. Auf der Seite „Erzählen“ gibt es Erzählbücher und Erzählbilder, die auf einfache Weise mit Fotos und Text ergänzt werden können, sowie mehrere Mitteilungstasten für natürliche Sprache (z.B. „Schule“ und „zu Hause“).

Buchstabenseiten mit Wortvorhersage unterstützen bei der Schrifteingabe und helfen beim Lesen- und Schreibenlernen.

**Für einen erfolgreichen Start bietet LoGoFoXX 60 zahlreiche Hilfen für den Talkernutzer und seine Begleiter.**

## **Orientierungshilfen für den Nutzer:**

- deutliche, vollflächige Farbmarkierungen
- Anordnung der Wortgruppen in Leserichtung (auf den Themenseiten)
- einheitliche Navigationsmuster auf allen Seiten
- Buchstabentastatur mit Anlauten und Wortvorhersage
- Die Themenseiten bleiben geöffnet, um die Kombination mehrerer Wörter aus einem Thema zu erleichtern.

## **zusätzliche Hilfen für das betreuende Umfeld:**

- alphabetische Anordnung der Verben
- Anordnung der Adjektive in Gegensatzpaaren
- Wortsuche
- freie Speicherplätze für die Wortschatzerweiterung
- Im Menü HILFE steht das Software-Manual zum Nachschlagen auch direkt auf dem Gerät zur Verfügung.

## **außerdem:**

- Erzähltasten für Sprachaufnahmen
- Erzähltasten für Fotos

## **Hinweise zum Textfenster:**

In der Standardeinstellung spricht der Talker jedes Wort einzeln aus und schreibt es ins Textfenster. Um Wörter aus dem Textfenster zu löschen, betätigen Sie auf einem NovaChat das graue Feld mit dem X am rechten oberen Rand. (Kurzes Tippen löscht jeweils das letzte Wort, langes Tippen löscht den gesamten Textfensterinhalt.) Falls Sie LoGoFoXX 60 auf einem Accent-Talker benutzen, können Sie den Textfensterinhalt mit der Taste „Display löschen“ entfernen. Um gesammelte Wörter zusammenhängend sprechen zu lassen, tippen Sie direkt ins Textfenster.

## AUFBAU DER STARTSEITE



Die farbig hinterlegten Tasten in den oberen Zeilen der Startseite öffnen Seiten mit unterschiedlichen Wortarten. In allen Prentke Romich-Wortschatzprogrammen sind z.B. die Tätigkeitswörter (Verben) gelb und die Eigenschaftswörter (Adjektive) grün markiert.

Die gelben Tasten in der oberen Reihe öffnen Seiten, auf denen die Tätigkeitswörter passend zu dem gewählten Pronomen jeweils in der gebeugten Form angeboten werden „ich fahre“, „du fährst“ usw.. Die Wortarten-Tasten in der zweiten Zeile führen zu den wichtigen kleinen Wörtern, die wir in der Kommunikation besonders häufig benutzen und zu den Grundformen der Tätigkeitswörter und Eigenschaftswörter.

Hinter den beiden Tasten „Sätze“ (oben links) und „Floskeln“ (unten links) verbergen sich kurze Sätze und Kommentare, die im Alltag häufig eingesetzt werden können.

Die Tasten mit weißem Hintergrund öffnen verschiedene Themenfelder (s. Übersicht auf der nächsten Seite). Mit der ABC-Taste unten rechts kommt man zur Buchstabentastatur.

**Hinweis:** Eine detaillierte Darstellung und Erläuterung zum Aufbau der einzelnen Seiten finden Sie in der Bedienungsanleitung „Einführung in das LoGoFoXX 60 Wortschatzprogramm“, das Sie mit dem Talker erhalten haben.

## AUFBAU DER THEMENSEITEN

Die Themenseiten sind nach einer einheitlichen Struktur aufgebaut. Sie bieten Zugang zu ausgewählten Hauptwörtern (Nomen) des jeweiligen Wortfeldes sowie dazu passenden Tätigkeitswörtern (Verben).

Die einzelnen Bereiche werden anhand der Themenseite **Kleidung** beispielhaft erläutert:



Spalte 1:

„Ich möchte“ und „nicht“ eignen sich für den Anfang eines einfachen Satzmusters.

Die Spalten 2 – 8 sind für themenrelevante Hauptwörter (Nomen) reserviert.

Wenn es zu einem Thema eine oder mehrere Unterkategorien gibt, sind diese in der oberen Zeile über dunkelblaue Kategorietasten (hier „Accessoires“ / „Schuhe“) zu erreichen.

In den Spalten 9 und 10 findet man ausgewählte themenrelevante Tätigkeitswörter (Verben).

Die unterste Zeile beinhaltet in der Regel ein Adjektivpaar (hier „unbequem“ / „bequem“) und ausgewählte kleine Wörter (hier „auf“ / „zu“)

Außerdem befinden sich in der untersten Zeile zwei Tasten zum Verändern der Grundform von Hauptwörtern, Tätigkeits- und Eigenschaftswörtern:

Mittels der Taste „Plural“ kann für Hauptwörter nachträglich die Mehrzahl-Form gebildet werden (z.B. Schuh – Schuhe, Kleid – Kleider usw.).

Die Taste „Abwandeln“ bietet die Möglichkeit, die Grundform (Infinitiv) der Verben und Adjektive auf dieser Themenseite direkt abzuwandeln. Um das auszuprobieren, wählen Sie zuerst ein Tätigkeitswort in der Grundform aus, z.B. „ausziehen“. Drücken Sie dann die Taste „Abwandeln“ und wählen Sie die gewünschte Form aus, z.B. „ausgezogen“

Die „Home-Taste“ unten rechts führt zurück auf die Startseite.

Die Wörter auf den Themenseiten sind so angeordnet, dass in Leserichtung von links nach rechts einfache Mehrwortäußerungen und kleine Sätze gebildet werden können:



Beispiel: „Ich möchte T-Shirt anziehen“

Die Wörter werden im Textfenster gesammelt und können dann im Zusammenhang vom Talker vorgelesen werden, wenn der Nutzer ins Textfenster tippt.



## TASTEN, THEMENFELDER UND BEISPIELWÖRTER




<div>ICH</div> <div></div> <div>Phrasen</div> <div>ICH</div> <div>ich mein</div>	<div>DU</div> <div></div> <div>Phrasen</div> <div>DU</div> <div>du dein</div>	<div>ER</div> <div></div> <div>Phrasen</div> <div>ER</div> <div>er sein</div>	<div>SIE</div> <div></div> <div>Phrasen</div> <div>SIE</div> <div>sie ihr</div>	<div>ES</div> <div></div> <div>Phrasen</div> <div>ES</div> <div>es sein</div>	<div>WIR</div> <div></div> <div>Phrasen</div> <div>WIR</div> <div>wir unser</div>	<div>IHR</div> <div></div> <div>Phrasen</div> <div>IHR</div> <div>ihr euer</div>	<div>SIE</div> <div></div> <div>Phrasen</div> <div>SIE-PL.</div> <div>sie ihr</div>	<div></div> <div>lösche Wort</div>	<div></div> <div>lösche Display</div>
<div>SÄTZE</div> <div></div> <div>Zeig mal! Lass das!</div>	<div>FRAGEN</div> <div></div> <div>wann warum</div>	<div>AD- VERBIEN</div> <div></div> <div>nur jetzt</div>	<div>PRO- NOMEN</div> <div></div> <div>kein etwas</div>	<div>PRÄPOSI- TIONEN</div> <div></div> <div>mit zu</div>	<div>KONJUNK- TIONEN</div> <div></div> <div>aber und</div>	<div>VERBEN</div> <div></div> <div>haben sehen</div>	<div>ADJEKTIVE</div> <div></div> <div>alt neu</div>	<div></div> <div>leiser</div>	<div></div> <div>lauter</div>
<div>HAUS</div> <div></div> <div>Werkzeug Möbel</div> <div>Zimmer Tür</div>	<div>SCHULE</div> <div></div> <div>Stundenpl. Räume Deutsch</div> <div>Pause Heft</div>	<div>NATUR</div> <div></div> <div>Pflanzen</div> <div>Blume Meer</div>	<div>ZEIT</div> <div></div> <div>Feste Zahlen Tagesplan</div> <div>Mittwoch Juli</div>	<div>GELD</div> <div></div> <div>Schulkiosk</div> <div>Preis 50 Cent</div>	<div>ERD- KUNDE</div> <div></div> <div>Bundes- länder Kontinente</div> <div>Bayern Afrika</div>	<div>KÖRPER</div> <div></div> <div>Hilfsmittel Medizin</div> <div>Auge Fieber</div>	<div>HAUS- HALT</div> <div></div> <div>Behälter Elektro- geräte</div> <div>Teller Herd</div>	<div>EIN</div> <div></div> <div>ein</div>	<div>DES</div> <div></div> <div>des</div>
<div>LEUTE</div> <div></div> <div>Namen Leute Berufe</div> <div>Frau Freund</div>	<div>ORTE</div> <div></div> <div>Geschäft Eisdiele</div>	<div>WETTER</div> <div></div> <div>Sonne Gewitter</div>	<div>GEFÜHLE</div> <div></div> <div>Liebe genervt</div>	<div>BASTELN</div> <div></div> <div>Farben Formen</div> <div>Schere Kreis</div>	<div>FAHREN</div> <div></div> <div>Verkehr</div> <div>Auto Ampel</div>	<div>SPORT</div> <div></div> <div>Vereine</div> <div>Fußball Training</div>	<div>PFLEGE</div> <div></div> <div>Dusche Kamm</div>	<div>DER</div> <div></div> <div>der</div>	<div>DEM</div> <div></div> <div>dem</div>
<div>ESSEN</div> <div></div> <div>Gemüse Obst Süßes</div> <div>Frühstück Brot</div>	<div>TRINKEN</div> <div></div> <div>Alkohol</div> <div>Saft Tee</div>	<div>TIERE</div> <div></div> <div>Bauernhof Wald Zoo</div> <div>Katze Vogel</div>	<div>UNTER- HALTUNG</div> <div></div> <div>Computer Musik</div> <div>Kamera Handy</div>	<div>SPIELEN</div> <div></div> <div>Buch Fantasie</div> <div>Lego Spielplatz</div>	<div>KLEIDUNG</div> <div></div> <div>Jacke Turnschuh</div>	<div>ERZÄHLEN</div> <div></div>		<div>DIE</div> <div></div> <div>die</div>	<div>DEN</div> <div></div> <div>den</div>
<div>FLOSKELN</div> <div></div> <div>danke okay</div>	<div>HALLO</div> <div></div> <div>Hallo</div>	<div>JA</div> <div></div> <div>ja</div>	<div>AUCH</div> <div></div> <div>auch</div>	<div>NICHT</div> <div></div> <div>nicht</div>	<div>NOCHMAL</div> <div></div> <div>nochmal</div>	<div>TOLL</div> <div></div> <div>toll</div>	<div>NEIN</div> <div></div> <div>nein</div>	<div>DAS</div> <div></div> <div>das</div>	<div>ABC</div> <div></div> <div>Zahlen Zeichen</div>

## TÄTIGKEITSWÖRTER (VERBEN)


Tätigkeitswörter erkennen Sie an der gelben Hintergrundmarkierung.

Während auf den Themenseiten die Tätigkeitswörter zunächst nur in der Grundform abgerufen und dann ggf. nachträglich mit Hilfe der Taste ABWANDELN gebeugt werden können, gelangen Sie mit den gelben Personalpronomen-Tasten (ich, du, er, ...) auf der Startseite direkt zu den kombinierten Phrasen.

Die Personalpronomen öffnen jeweils eine Seite, auf der die Verben in Kombination mit dem gewählten Personalpronomen bereits in der passenden Form angeboten werden:

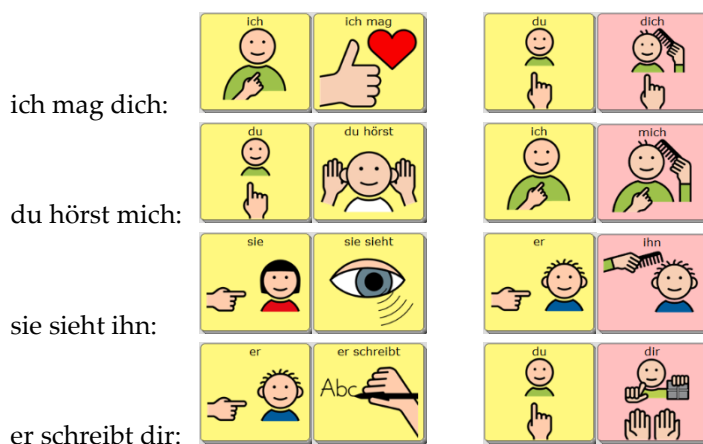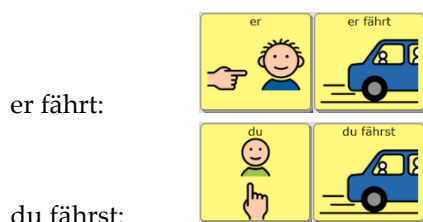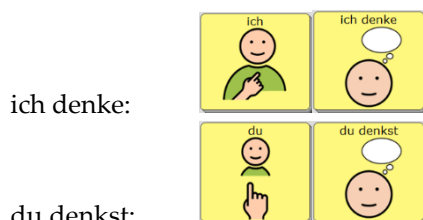



Die Taste  öffnet die erste von vier Verb-Seiten.

Auf der Seite **Verben 1** ist die zweite Zeile für die Hilfsverben reserviert:



Die übrigen Verben auf dieser und auf den anderen Verb-Seiten sind in alphabetischer Reihenfolge jeweils in der Grundform gespeichert:



denken




kommen



machen

Nachdem ein Verb in der Grundform ausgewählt wurde, erscheinen oben im Display Tasten, mit denen die anderen Verbformen gebildet werden können:

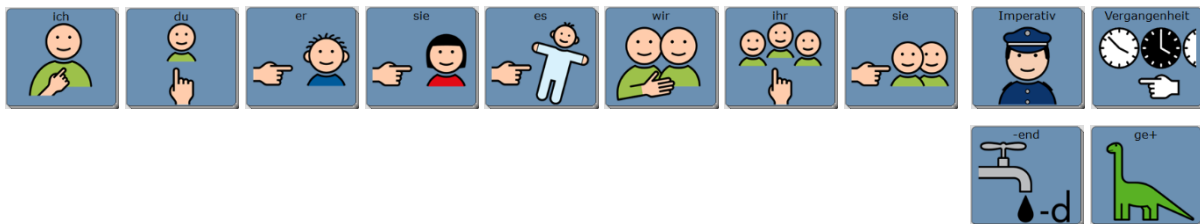

kommst



mach



gedacht

**Probieren Sie selbst:**

- ich kann malen
- wir dürfen spielen
- kommst du auch
- kannst du das
- mach das nochmal
- frag nicht
- er hat gedacht
- sie ist gefahren



**HINWEIS:** Auf der ABC-Seite  befindet sich die Funktion „Wortsuche“.




Schreiben Sie ein Wort (in der Grundform) ins Textfeld, und drücken Sie anschließend die Taste **WORT SUCHEN**. Oben rechts im Textfeld wird daraufhin die Tastenfolge angezeigt, unter der Sie das Wort im Vokabular finden. (Falls das Wort auf mehreren Seiten vorkommt, wechseln sich die Sequenzen ab.)




## EIGENSCHAFTSWÖRTER (ADJEKTIVE)

Eigenschaftswörter haben eine grüne Hintergrundmarkierung.










Die Taste  öffnet die erste von drei Adjektiv-Seiten.



Auf den einzelnen Seiten sind die Adjektive überwiegend als Gegensatzpaare angeordnet:

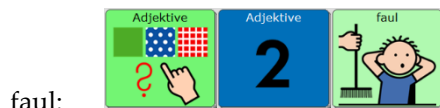

Die unterschiedlichen Endungen erhält man, wenn man nach dem Abrufen der Grundform eine der grünen Endungstasten wählt, die dann rechts am Rand an Stelle der Artikel-Tasten (der, die, das usw.) eingeblendet werden:

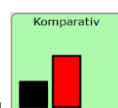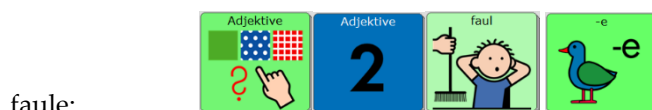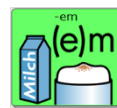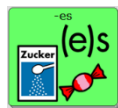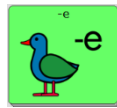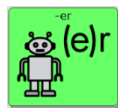

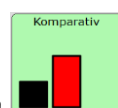Steigerungsformen können mit Hilfe der Tasten  und  gebildet werden:

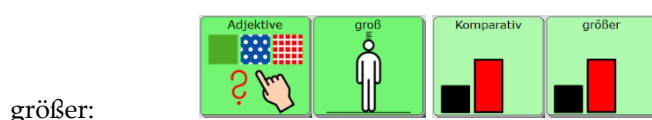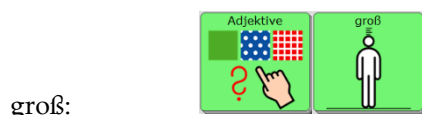

am größten:



ein



groß



Hund



die



wärmste




Jacke


**Probieren Sie selbst:**

- ein alter Schuh
- ein leeres Glas
- das schnellste Auto

## HAUPTWÖRTER (NOMEN)

Die Hauptwörter sind nach Themenbereichen gegliedert und jeweils in der Einzahl auf den verschiedenen Themenseiten gespeichert.

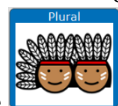

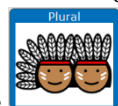Mit der Plural-Taste , die sich unten links auf jeder Themenseite befindet, kann zu den Hauptwörtern auch die Mehrzahlform gebildet werden. Rufen Sie das Wort zunächst in der Einzahl auf, und drücken Sie anschliessend die Plural-Taste.



Hund:




Hunde:




Jacke:



Jacken:

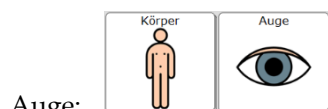

Augen:

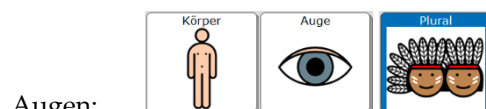


Augen:

**Probieren Sie selbst:**

- Katzen haben grüne Augen.
- Du brauchst neue Schuhe.
- Ich kann schöne Bilder malen.
- Sie will die Haare waschen.

## BEISPIELSÄTZE MIT SYMBOLEN

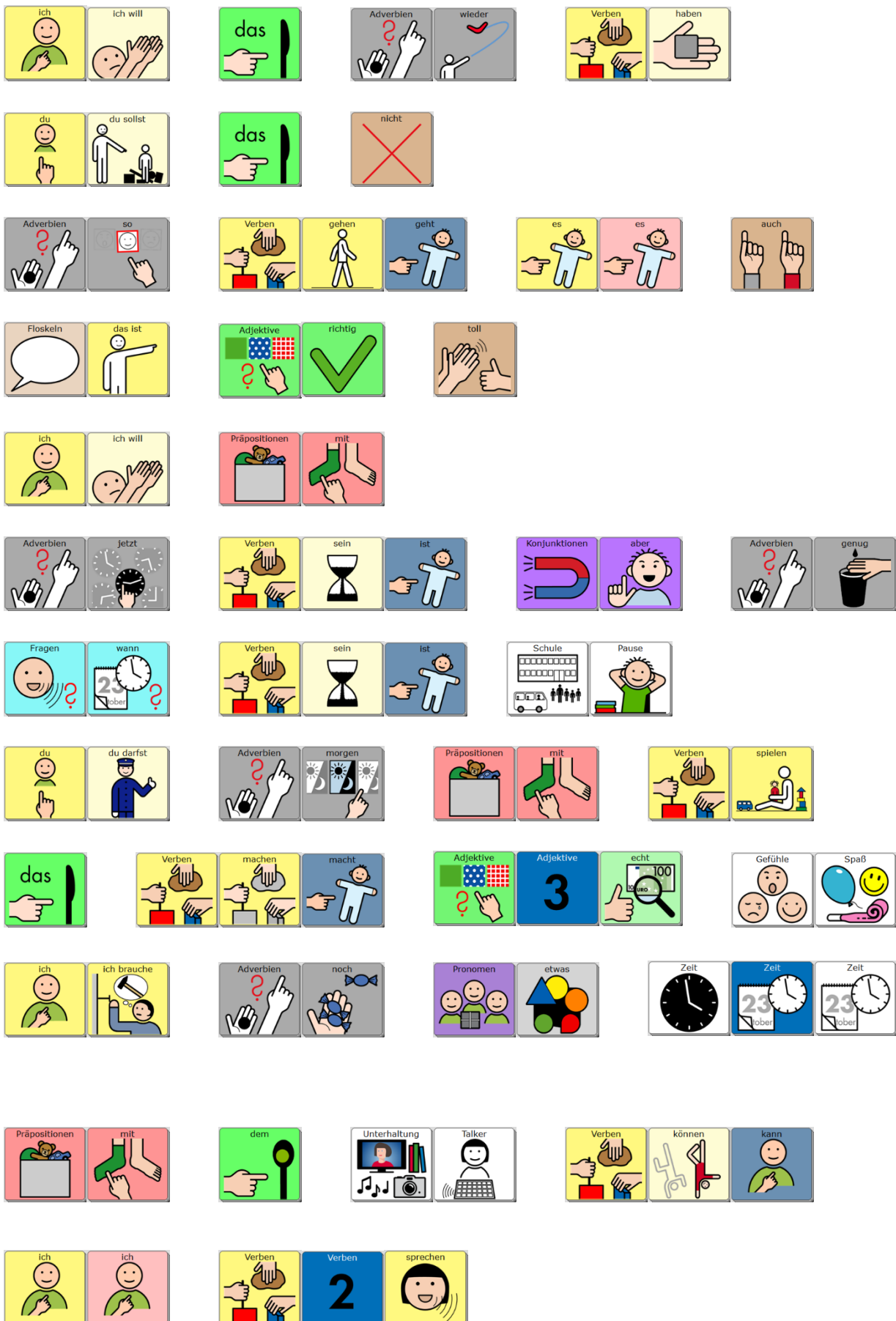

## BEISPIELSÄTZE MIT TEXT

Auf den vorangegangenen Seiten haben Sie gesehen, wie Wortformen gebildet werden und wo einzelne Wörter zu finden sind.

Wenn Sie versuchen, die folgenden Beispielsätze mit dem Talker zu sprechen, erleichtern Ihnen die Farbmarkierungen auf dieser Seite die Orientierung, weil sie durch den Hinweis auf die erste Taste (bzw. die Wortart) den Suchbereich eingrenzen (**Adjektive und Artikel**, **Verben**, **Adverbien**, **Konjunktionen**, **Präpositionen**, **Fragepronomen**, **Pronomen**, **Floskeln**).

Unabhängig davon steht Ihnen natürlich auch die Funktion „Wort suchen“ zur Verfügung, die Sie bereits auf Seite 8 kennengelernt haben.

das geht doch schon ganz gut

das ist aber schön

wer hat das gemacht

ich bin schon da

nicht ohne mich

das ist für dich

wann machen wir etwas zusammen

du machst das jetzt nochmal

etwas mehr bitte


ich bin schon fertig

# HILFESTELLUNGEN FÜR DEN BENUTZER

## KURZE SÄTZE UND KOMMENTARE




**Komm mal bitte!**

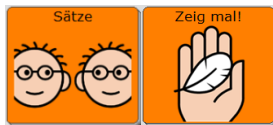

**Zeig mal!**




**Ich bin echt sauer!**

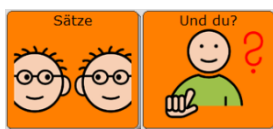


**Und du?**



**Wie alt bist du?**

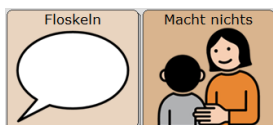

**Macht nichts!**

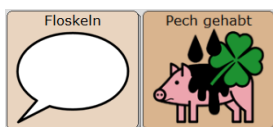

**Pech gehabt!**




**Quatsch!**



**Ich finde das super!**

## ERZÄHLEN MIT SPRACHAUFNAHMEN

(Hinweis: Falls Sie LoGoFoXX 60 auf einem **Accent** benutzen, benötigen Sie die Taste AUFNEHMEN nicht. Details finden Sie auf Seite 22 im Kapitel SPRACHAUFNAHMEN AUF DEN ERZÄHLSEITEN SPEICHERN.)

Im Bereich ERZÄHLEN  haben wir die beiden Mitteilungstasten

SCHULE  und ZU HAUSE  so gestaltet, dass sie nicht die „synthetische Computerstimme“ des Talkers, sondern die „digitalisierte menschliche Stimme“ benutzen.

Mit Hilfe der Taste AUFNEHMEN  können die Tasten SCHULE und ZU HAUSE neu besprochen werden:

1. Drücken Sie Taste AUFNEHMEN, um die Seite AUFNAHME zu öffnen.
2. Wählen Sie die Taste aus, die Sie verändern wollen. Im Display wird nun das Aufnahmefenster angezeigt. Oben links sehen Sie farbig hinterlegt die Bezeichnung, unter der die Sounddatei im Archiv gespeichert wird. Diesen Namen sollten Sie NICHT verändern.
3. Tippen Sie AUFNAHME, und sprechen Sie die gewünschte Mitteilung.
4. Tippen Sie auf STOPP, um die Aufnahme zu beenden.
5. Wenn Sie mit der Aufnahme zufrieden sind, drücken Sie OK, falls Sie neu aufnehmen möchten, wiederholen Sie die Schritte.

**TIPP:** Sie müssen die Aufnahmen nicht löschen, sondern können sie einfach mit einer neuen Aufnahme überspielen. Wenn Sie keine Aussage auf der Taste haben möchten, nehmen sie einfach einen Moment Stille auf, indem Sie nur kurz auf AUFNAHME und dann gleich wieder auf STOPP drücken.

Zeigen Sie dem Talkernutzer, dass er auf der Seite ERZÄHLEN vor dem Abspielen der Aufnahmen die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer lenken kann indem er z.B. sagt:





## INTERAKTIONSSTEUERnde WÖRTER UND AUSSAGEN

Auf den Seiten ADVERBIEN und PRÄPOSITIONEN finden Sie Aussagen, die im Alltag gut kombiniert und für zahlreiche Situationen eingesetzt werden können.

jetzt



immer




da



weg



nur

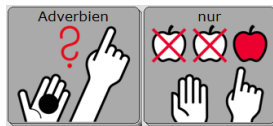

so



allein




zusammen



ich  
möchte



machen

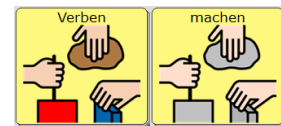

auf



zu



an



aus




mit




ohne



oben

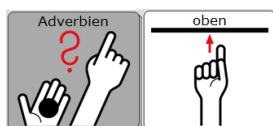

unten

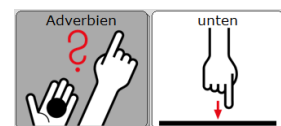

## FREI KOMBINIERTE AUSSAGEN

Auch mit einem anfangs noch kleinen Wortschatz können schon „eigene“ Aussagen zusammengesetzt werden, z.B.:


ich auch



du nicht




ich will allein

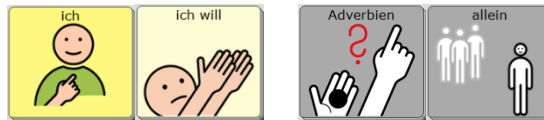

Montag Spielplatz spielen



Dienstag Fahrrad fahren

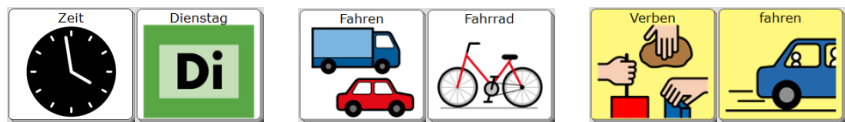

Mach mit!




Lach nicht!



Steh auf!



Ich bin wütend.

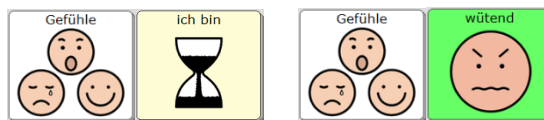

Bist du genervt?



Ich finde das cool.



## WORTSCHATZERWEITERUNG DURCH ANTWORTALTERNATIVEN

Wenn es um das konkrete Vermitteln neuer Wörter geht, ist es oft hilfreich, Fragen so zu formulieren, dass sie auf bestimmte Wörter abzielen, die gerade Gegenstand der Förderung sind. In Kombination mit dem Wort „oder“ können Zielwörter als Antwortvorschläge direkt in die Fragestellung eingebaut werden. Helfen Sie dem Talkernutzer ggf., indem Sie selbst die beiden Zielwörter jeweils mit dem Talker sprechen.

### Beispielfragen:

Soll die Musik **an** oder **aus**?

Willst du **viel** oder **wenig**?

Ist das **toll** oder **doof**?

Möchtest du Eis **mit** Sahne oder **ohne**?

Findest du das **lecker** oder **eklig**?

War die Ampel **grün** oder **rot**?

Kommt Oma **Dienstag** oder **Donnerstag**?

Wollen wir **malen** oder **spielen**?

### Formulieren Sie eigene Fragen zu diesen Antworten:

Frage:

Antwort:

---

schnell

---

Mama

---

groß

---

zu

---

gehen

## WÖRTER FINDEN ZUM BESCHREIBEN

Die Frage „Was ist das?“ ist auf die Bezeichnung eines Gegenstandes ausgerichtet. Dabei gibt es nur wenige Antwortmöglichkeiten, die auf die Gruppe der Nomen (Hauptwörter) abzielen. Die Frage „Was fällt Dir dazu ein?“ lässt dagegen viel Spielraum für Ideen und Wörter aus verschiedenen Wortarten. Sammeln Sie gemeinsam mit dem Talkernutzer mögliche Antworten und gehen Sie zusammen auf Entdeckungsreise im Talkerwortschatz.

### Was ist das?



*Becher / Löffel*

### Was fällt Dir dazu ein?

*trinken - Kaffee - heiß –  
Milch – Frühstück – Küche –  
Mama – Papa - Becher – Löffel –  
leer – kochen – braun – stark –  
Geburtstag – Kuchen essen –  
Oma besuchen –  
ich mag nicht ...*

### Was ist das?



### Was fällt Dir dazu ein?

---

---


---

---

---

---

### Was ist das?

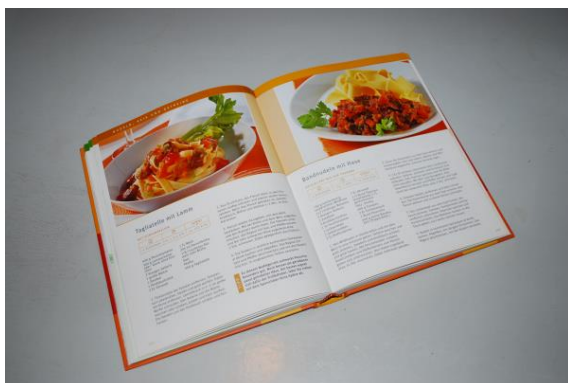

### Was fällt Dir dazu ein?

---

---

---

---

---

---

# INDIVIDUELLE ERWEITERUNGEN

## VERÄNDERUNGEN AUF DEM NOVACHAT VORNEHMEN

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Beschreibung der wichtigsten Funktionen, die Sie benötigen, um erste Änderungen vorzunehmen.

Die NovaChat-Geräte verfügen über eine Vielzahl weiterer Funktionen, die alle ausführlich im mitgelieferten Handbuch „Software-Manual“ dargestellt werden. Dort finden Sie auch detaillierte Informationen zum Arbeiten mit dem PC-Programm „Chat-Editor“, das es ermöglicht Veränderungen in LoGoFoXX am Computer vorzunehmen und in den NovaChat.

**Tipp:** Das Software-Manual steht Ihnen im Menü HILFE auch direkt auf dem Gerät zur Verfügung. Um in das Menü zu gelangen, drücken Sie zuerst die MENÜ-Taste am Displayrand, um die Liste mit den Bereichen EDITIERMODUS, EINSTELLUNGEN, BIBLIOTHEK und HILFE zu öffnen. Tippen Sie zuerst auf HILFE und danach auf HILFETHEMEN. Zum Schließen des Menüs betätigen Sie mehrfach den ZURÜCK-Pfeil, bis wieder die LoGoFoXX-Oberfläche erscheint.

### EDITIERMODUS EIN- UND AUSSCHALTEN

Um Änderungen vornehmen zu können, muss der Editiermodus eingeschaltet sein.

1. Zum Einschalten des EDITIERMODUS drücken Sie zuerst die MENÜ-Taste am Displayrand, um die Liste mit den Bereichen EDITIERMODUS, EINSTELLUNGEN, BIBLIOTHEK und HILFE zu öffnen.
2. Tippen Sie auf EDITIERMODUS. Ein grüner Haken erscheint.
3. Ein roter Schriftzug am unteren Rand signalisiert Ihnen, dass der EDITIERMODUS aktiv ist.
4. Zum Schließen des EDITIERMODUS drücken Sie wieder zuerst die MENÜ-Taste und anschließend das Feld EDITIERMODUS. Der rote Schriftzug und der grüne Haken verschwinden und sie befinden sich wieder im Benutzermodus.

### TASTEN BEARBEITEN UND NEUE TASTEN ERSTELLEN

1. Aktivieren Sie den EDITIERMODUS.
2. Halten Sie die Taste, die Sie bearbeiten möchten, einen Moment lang gedrückt, bis sich in der Displaymitte ein neues Menü öffnet.
3. Wählen Sie TASTE BEARBEITEN. (Um an einer freien Stelle eine **neue Taste** anzulegen, drücken Sie so lange auf die freie Stelle, bis sich in der Mitte ein neues Menü öffnet. Wählen Sie NEUE TASTE ERSTELLEN und folgen Sie den weiteren Schritten im Text.)
4. In der Rubrik ALLGEMEIN (oben links) können Sie die Beschriftung der Taste (LABEL), die zu sprechende Aussage (MITTEILUNG) und das BILD ändern. In der Rubrik LAYOUT (oben Mitte) können Sie die Farben und die Schriftart verändern. In der Rubrik FUNKTION können Sie der Taste einen Befehl zuweisen (z.B. „Mitteilung ausgeben“ oder „Seite anzeigen“). In den meisten Fällen werden sich Ihre Änderungen vermutlich auf die Rubrik ALLGEMEIN beschränken.
5. Um die Beschriftung der Taste (LABEL) und die Aussage (MITTEILUNG) einzugeben, tippen Sie jeweils in die leere Zeile unterhalb des Wortes. Daraufhin wird im Display eine Tastatur eingeblendet, auf der Sie den gewünschten Inhalt eingeben können.
6. Um die Taste mit einem BILD (METACOM-Symbol) aus dem NovaChat-Archiv zu belegen, wählen Sie LADEN. Die Anzeige im Display ändert sich.
7. Tippen Sie in der oberen Zeile links neben die Taste SUCHEN, um die Tastatur einzublenden, auf der Sie das zu suchende Bild eingeben können.
8. Drücken Sie anschließend SUCHEN, um die Suche zu starten. Die Suchergebnisse werden im Display angezeigt.
9. Wählen Sie das gewünschte Bild aus, indem Sie darauf tippen.
10. Um die Taste mit einem Foto zu belegen, wählen Sie KAMERA. Der NovaChat schaltet in den Kameramodus um, und sie können direkt mit dem Gerät fotografieren. Nach dem Auslösen sehen Sie eine Vorschau des Fotos.

11. Wenn Ihnen das Bild nicht gefällt, wählen Sie WIEDERHOLEN, um eine neue Aufnahme zu machen. Wenn das Foto Ihren Vorstellungen entspricht, wählen Sie OK und geben Sie einen Namen für das Bild ein, damit Sie es später im Archiv finden können.
12. Wenn die Taste nach Ihren Vorstellungen gestaltet ist, beenden Sie die Aktion mit OK.
13. Schalten Sie den EDITIERMODUS aus, falls Sie keine weiteren Änderungen mehr vornehmen möchten.

#### **TASTEN ANORDNEN**

Wenn der EDITIERMODUS eingeschaltet ist, können Sie durch das Schieben mit dem Finger die Tastenpositionen direkt auf dem Display verändern.

#### **TASTEN ENTFERNEN**

1. Aktivieren Sie den EDITIERMODUS.
2. Halten Sie die Taste, die Sie bearbeiten möchten, einen Moment lang gedrückt, bis sich in der Displaymitte ein neues Menü öffnet.
3. Wählen Sie TASTE ENTFERNEN.
4. Durch den Befehl TASTE ENTFERNEN entsteht eine Lücke auf der Seite. Um diese Lücke zu schließen, gibt es zwei Möglichkeiten:
  - a) Drücken Sie die entsprechende Stelle und wählen Sie NEUE TASTE ERSTELLEN
  - b) Halten Sie eine leere Taste gedrückt und wählen Sie TASTE KOPIEREN. Dann drücken Sie auf die Lücke und wählen TASTE EINFÜGEN.
5. Schalten Sie den EDITIERMODUS aus, falls Sie keine weiteren Änderungen mehr vornehmen möchten.

#### **TASTEN ANZEIGEN UND VERBERGEN**

Um die Orientierung auf den Seiten zu erleichtern, kann es hilfreich sein, in der Anfangszeit zunächst einige Felder auszublenden, die später wieder dazu geschaltet werden.

1. Aktivieren Sie den EDITIERMODUS.
2. Tippen Sie erneut die MENÜ-Taste und wählen Sie aus der Liste die Option TASTEN ANZEIGEN / VERBERGEN. Auch dort erscheint ein grüner Haken.
3. Ein roter Schriftzug unten im Display signalisiert Ihnen, dass der Modus TASTEN VERSTECKEN aktiviert ist.
4. Alle Tasten, die Sie jetzt berühren, werden beim ersten Tippen verborgen (grau) und beim erneuten Tippen wieder angezeigt (hell).
5. Um den Modus zu verlassen, tippen Sie die MENÜ-Taste und entfernen die grünen Haken bei TASTEN ANZEIGEN / VERBERGEN.
6. Schalten Sie den EDITIERMODUS aus, wenn Sie keine weiteren Änderungen mehr vornehmen möchten.

#### **AUSSPRACHE EINZELNER WÖRTER KORRIGIEREN**

Namen von Personen oder Orten werden von der synthetischen Stimme häufig anders ausgesprochen, als wir es gewohnt sind.

Im Menü EINSTELLUNGEN gibt es ein Aussprache-Lexikon, in dem Sie für einzelne Wörter die Aussprache korrigieren können.

1. Zum Einschalten der EINSTELLUNGEN drücken Sie zuerst die MENÜ-Taste, um die Liste mit den Bereichen EDITIERMODUS, EINSTELLUNGEN, BIBLIOTHEK und HILFE zu öffnen.
2. Tippen Sie dann auf EINSTELLUNGEN. In der Liste, die daraufhin erscheint, finden Sie an zweiter Stelle den Bereich SPRACHAUSGABE.
3. Tippen Sie auf SPRACHAUSGABE und anschließend auf SPRACHSYNTHESE. In der Folge erscheint in einer weiteren Liste an dritter Stelle der Menüpunkt AUSSPRACHE.
4. Tippen Sie auf AUSSPRACHE, um die Wortliste des Aussprache-Lexikons zu öffnen.



5. Um ein neues Wort hinzuzufügen, drücken Sie die MENÜ-Taste. Sie sehen links die Liste mit bereits korrigierten Wörtern. Rechts oben am Displayrand erscheint die Option NEU.
6. Zum Eingeben eines neuen Wortes tippen Sie auf NEU. Über der Tastatur sehen Sie WORT, AUSSPRACHE und die Schaltfläche ANHÖREN.
7. Geben Sie unterhalb von WORT das gewünschte Wort in der korrekten Schreibweise ein.
8. Geben Sie unterhalb von AUSSPRACHE das Wort in einer lautgetreuen Schreibweise ein. (Um die Betonung zu ändern, hilft oft ein Leerzeichen mitten im Wort.)
9. Tippen Sie auf ANHÖREN, um die korrigierte Aussprache zu überprüfen und ggf. nochmal zu verändern.
10. Wenn Sie mit der Aussprache zufrieden sind, beenden Sie das Menü mit OK.
11. Drücken Sie den ZURÜCK-Pfeil so oft, bis Sie wieder auf der LoGoFoXX-Oberfläche angekommen sind.

#### **DATENSICHERUNG DURCH DUPLIZIEREN**

Um sich vor Datenverlust zu schützen, empfehlen wir Ihnen, regelmäßig eine Sicherungskopie im NovaChat anzulegen, damit Ihre persönlichen Veränderungen nicht verloren gehen.

1. Um eine Kopie des Wortschatzes zu erzeugen, drücken Sie zuerst die MENÜ-Taste um die Liste mit den Bereichen EDITIERMODUS, EINSTELLUNGEN, BIBLIOTHEK und HILFE zu öffnen.
2. Tippen Sie dann auf BIBLIOTHEK. Sie sehen eine alphabetische Liste mit allen auf dem Gerät enthaltenen Vokabularen.
3. Blättern Sie nach unten zu ihrem LoGoFoXX-Wortschatz. Die aktuell geöffnete Datei erkennen Sie an einem grünen Haken vor dem Dateinamen.
4. Tippen Sie auf diese Datei. In der Displaymitte erscheint ein neues Menü. Wählen Sie daraus DUPLIZIEREN.
5. Der NovaChat bietet Ihnen als Namen für das neue Vokabular den bisherigen Dateinamen mit dem Anhängsel „Kopie“ an. Da sich im Laufe der Zeit mehrere Datensicherungen ansammeln, ist es sinnvoll, den Anhang „Kopie“ durch das jeweilige Datum der Sicherung zu ersetzen. Wenn Sie das Datum in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag eingeben, werden Sie die neueste Datei immer ganz unten finden.
6. Nach Eingabe des neuen Namens drücken Sie OK. Die neue Datei erscheint jetzt unterhalb des bislang genutzten Wortschatzes, der immer noch mit dem grünen Haken gekennzeichnet ist.
7. Tippen Sie auf die neue Datei und dann auf ÖFFNEN, um mit ihr weiter zu arbeiten.

## VERÄNDERUNGEN AUF DEM ACCENT VORNEHMEN

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Beschreibung der wichtigsten Funktionen und deren Benutzung.

Die Accent-Geräte verfügen über eine Vielzahl weiterer Funktionen, die alle ausführlich im mitgelieferten Handbuch „NuVoice Software-Manual“ dargestellt werden.

**Tipp:** Das Software-Manual steht Ihnen im Menü HILFE auch direkt auf dem Gerät zur Verfügung. Mit der Fragezeichen-Taste im Statusfenster können Sie das Menü öffnen. Zum Schließen des Menüs betätigen Sie das X-Feld oben rechts in der Ecke.

### TASTEN BEARBEITEN

Tastenbelegungen können komfortabel mit Hilfe der SETUP-Taste vorgenommen werden:

Öffnen Sie die Seite, auf der Sie eine Änderung vornehmen möchten.

Drücken Sie die Gerätetaste am unteren Displayrand und dann die SETUP-Taste.

Wählen Sie das entsprechende Feld aus. Nehmen Sie mit Hilfe der Optionen „TEXT oder FUNKTION EINGEBEN“, „BILD ÄNDERN“ und „LABEL ÄNDERN“ die gewünschten Änderungen vor, und verlassen Sie anschließend das Menü mit OK.

Wenn Sie die Kamera des Accent nutzen möchten, um ein Foto auf einer Taste zu speichern, wählen Sie die Taste KAMERA (neben SETUP), um ein Foto zu machen.

**WICHTIG:** Speichern Sie dieses Foto als IKON und geben Sie ihm einen Namen, um es im Bildarchiv wiederzufinden. Danach können Sie es mit der Option „BILD ÄNDERN“ aus dem Ordner IMPORTE auf die Taste kopieren.

### SEITE ANORDNEN

Öffnen Sie die Seite, auf der Sie eine Änderung vornehmen möchten.

Nach dem Betätigen der SETUP-Taste können mittels der Option „SEITE ANORDNEN“

Tastenpositionen vertauscht werden. Folgen Sie den Hinweisen im Textfenster, und verlassen Sie anschließend das Menü mit OK.

### TASTEN ENTFERNEN

Öffnen Sie die Seite, auf der Sie eine Änderung vornehmen möchten.

Nach dem Betätigen der SETUP-Taste wird oben rechts die Option „FELD LÖSCHEN“ eingeblendet.

Auf welche Taste sich diese Aktion bezieht, sehen Sie in der Vorschau unten links. Falls ein Feld irrtümlich entfernt wurde, können Sie diese Aktion direkt im Anschluss an den Löschvorgang widerrufen. Falls Sie ein anderes bzw. ein weiteres Feld löschen möchten, können Sie mit der blauen Taste unten in der Mitte „NÄCHSTE ZU BELEGENDE TASTE WÄHLEN“ direkt noch weitere Felder auswählen.

### TASTEN ANZEIGEN UND VERBERGEN

Um die Orientierung auf den Seiten zu erleichtern, kann es hilfreich sein, in der Anfangszeit zunächst einige Felder auszublenden, die später wieder dazu geschaltet werden.

Um Felder zu verbergen, öffnen Sie die entsprechende Seite mit Hilfe der SETUP-Taste. Wählen Sie die Option „TASTEN VERBERGEN/ANZEIGEN“, und folgen Sie den Hinweisen im Textfenster.

### SPRACHAUFNAHMEN AUF DEN ERZÄHLSEITEN SPEICHERN

Im Bereich ERZÄHLEN sind Seiten gestaltet, die nicht die „synthetische Computerstimme des Talkers“, sondern die „digitalisierte menschliche Stimme“ benutzen.

Die jeweilige Sprachaufnahme können Sie wie folgt verändern:

Gehen Sie im Bereich ERZÄHLEN zu der Seite, auf der die Sprachaufnahme verändert werden soll und wählen Sie die SETUP-Taste.

Drücken Sie die zu bearbeitende Taste und stellen Sie bei „ART DER MITTEILUNG“ „digital“ ein, um die Funktionen „Mitteilung aufnehmen“ und „Aufnahme abhören“ zu aktivieren. Wählen Sie „MITTEILUNG AUFNEHMEN“ und folgen Sie den Hinweisen im Textfenster.

### AUSSPRACHE EINZELNER WÖRTER KORRIGIEREN

Da es besonders bei Namen von Personen und Orten zu Ausspracheproblemen kommen kann, erklären wir hier kurz, wie Sie die Aussprache korrigieren können.

1. Öffnen Sie die TOOLBOX.
2. Wählen Sie bei den gelben Tasten „MENÜ AUSSPRACHE“.
3. Wählen Sie, ob Sie das Lexikon der Sprechstimme oder das der Ansagenstimme bearbeiten wollen.  
(Ansagen sind eine Hilfefunktion für Benutzer mit visuellen Beeinträchtigungen.)
4. Wählen Sie „WORT HINZUFÜGEN“.
5. Geben Sie das Wort in der korrekten Schreibweise ein, und drücken Sie OK.
6. Geben Sie eine lautgetreue Schreibweise für das Wort ein.
7. Drücken Sie auf das Textfenster oder die Taste „SPRICH DISPLAY“, um die Aussprache zu prüfen.
8. Haben Sie eine zufriedenstellende Aussprache gefunden, speichern Sie die Eingabe mit OK.

Der Talker teilt Ihnen mit, falls ein Wort bereits im Aussprache-Lexikon enthalten ist. Sie sehen dann automatisch die phonetische Schreibweise und können diese bearbeiten.

### DATENSICHERUNG

Um sich vor Datenverlust zu schützen, empfehlen wir Ihnen, regelmäßig eine Sicherungskopie anzulegen, damit Ihre persönlichen Veränderungen nicht verloren gehen.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die TOOLBOX.
2. Wählen Sie bei den gelben Tasten „MENÜ SPEICHERÜBERTRAGUNG“.
3. Tippen Sie „BENUTZERBEREICH SICHERN“ und wählen Sie den entsprechenden Benutzerbereich aus.
4. Entscheiden Sie, ob die Datei im Gerät oder auf einem USB-Stick gespeichert werden soll und wählen Sie die entsprechende Option.
5. Geben Sie einen Dateinamen ein und wählen Sie OK.

# PRD ONLINE

Stöbern Sie doch einfach mal auf unserer Homepage [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de)! Sie finden dort umfangreiche Informationen rund um unsere Produkte und viele nützliche Tipps und Hilfen.

## PRD-IDEEN

Die „PRD-Ideen“ sind ein kostenloser Service von PRD. Wir machen Ihnen Vorschläge, wie Sie Aktivitäten so gestalten können, dass Ihr Talker-Benutzer aktiv daran teilnehmen kann. Melden Sie sich auf unserer Homepage mit Ihrer E-Mail-Adresse an, damit wir Ihnen monatlich den entsprechenden Link zuschicken können. Alle bisher erschienenen Ideen stehen zum Download zur Verfügung und bieten Ihnen einen großen Fundus an praktischen Tipps.

## MINFO

Unser kostenloser Newsletter „Minfo“ hält Sie über wichtige UK-Themen und Neuigkeiten bei PRD auf dem Laufenden. „Minfo“ ist in elektronischer Form als PDF auf unserer Homepage erhältlich. Den entsprechenden Link schicken wir Ihnen, wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse angemeldet haben.

## VIDEOHILFE

In der Rubrik „Praxistipps“ finden Sie kurze Video-Anleitungen zu häufig gestellten Fragen bezüglich der Programmierung unserer Talker. Sehen Sie sich zum Beispiel an, wie Sie die Aussprache eines Wortes ändern oder eine Sicherungskopie anlegen können.

## ONLINE-SCHULUNGEN

Zusätzlich zu unseren Präsenzveranstaltungen (Konferenzen, Seminare und Workshops) bieten wir auch Internet-basierte Fortbildungen an, an denen Sie bequem vom heimischen PC aus teilnehmen können. Die Online-Schulungen sind interaktiv, so dass es den Teilnehmenden möglich ist, Fragen zu stellen oder Kommentare zu äußern. Themen und Anmeldeoptionen finden Sie in der Rubrik „Service“.

## ONLINE-KURSE UND VIDEOHANDBÜCHER

Terminunabhängig und komplett im eigenen Tempo können Sie in der Rubrik „Praxistipps“ Talker und Wortschatzprogramme mit Hilfe der Online-Kurse und Videohandbücher entdecken.

## DIDAKTISCHE MATERIALIEN

Didaktische Materialien zu den verschiedenen Anwendungsprogrammen stehen teilweise kostenlos zum Download zur Verfügung oder können über unseren Webshop gekauft werden. Um zu den Materialien zu gelangen, wählen Sie im Bereich „Praxistipps“ die Rubrik „Didaktische Materialien“ und dort das gewünschte Gerät aus.

## FACEBOOK

Auch auf unserer PRD-Facebook-Seite gibt es aktuelle Informationen und interessante Neuigkeiten zu entdecken. Folgen Sie uns auf Facebook und bleiben Sie up-to-date!



prentke romich deutschland  
weil jede:r was zu sagen hat!

### Prentke Romich GmbH

Karthäuserstraße 3

D - 34117 Kassel

Tel. (05 61) 7 85 59-0

Fax (05 61) 7 85 59-29

E-Mail [info@prentke-romich.de](mailto:info@prentke-romich.de)

Web [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de)