

## **MOBILGERÄT-ANSTEUERUNG**

## Mobilgerät-Ansteuerung

Der Talker kann über die interne Bluetooth-Schnittstelle zur Steuerung eines Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefons (Handy, Smartphone) oder Tablets eingesetzt werden. Wenn Sie ein Android-Smartphone besitzen und dort die App „AeroText“ installieren, können Sie weiterhin SMS (Textnachrichten) von Ihrem Accent versenden und auf ihm empfangen.

### Accent & Mobilgerät koppeln

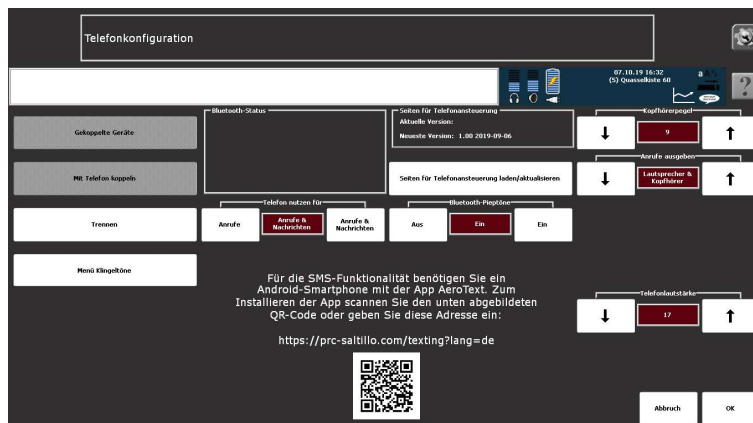
Bevor ein Talker mit einem Mobilgerät kommunizieren kann, müssen die beiden Geräte gekoppelt und verbunden werden. Dazu muss die Bluetooth-Schnittstelle auf dem Mobilgerät zunächst aktiviert werden. Wichtig ist auch, dass das Telefon seine Kennung bekannt gibt, d.h. für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist. Nehmen Sie im Menü Bluetooth Ihres Mobilgeräts folgende Einstellungen vor:

- Bluetooth: Ein
- Sichtbarkeit meines Telefons: Für alle sichtbar (sollte nach dem erfolgreichen Koppeln wieder auf „Verborgen“ gestellt werden)
- Geben Sie Ihrem Telefon mit Hilfe der Menüoption „Name meines Telefons“ einen eindeutigen Namen.

Die genauen Bezeichnungen hängen von Ihrem Mobilgerät ab. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts nach, um die Einstellungen vorzunehmen.

Sind diese Vorbereitungen abgeschlossen, können Sie Telefon und Talker koppeln. Diesen Vorgang müssen Sie nur einmal durchführen; treffen die beiden Geräte zukünftig aufeinander und ist Bluetooth auf dem Mobilgerät aktiviert, erkennen und verbinden sie sich automatisch.

Um Telefon und Talker zu koppeln, wählen Sie im Talker im Menü SYSTEM die Option „Hardware-Tests“ und öffnen das Menü „Telefonkonfiguration“.



Wählen Sie die Option „Mit Telefon koppeln“.

Auf dem Smartphone erscheint nach kurzer Zeit im Display (je nach Modell kann die Meldung ggf. abweichen): „PIN eingeben, um mit PRC DEVICE BT zu koppeln (Versuchen Sie 0000 oder 1234) Koppeln mit Talker?“. Wählen Sie OK.

## Talker & Mobilgerät verbinden

Einmal gekoppelte Geräte verbinden sich automatisch wieder, sofern Bluetooth bei beiden Geräten eingeschaltet ist und nicht eines der beiden Geräte mit einem dritten Gerät verbunden ist. Sollte sich Ihr Smartphone bzw Handy nicht automatisch wieder mit dem Accent verbinden, so öffnen Sie das Talker-Menü „Gekoppelte Geräte“ und wählen Sie Ihr Mobilgerät aus. Der Accent fragt: „Mit Gerät verbinden“. Wählen Sie „JA“.

Haben Sie mehrere Smartphones gekoppelt, können Sie über dieses Menü das Mobilgerät auswählen, das Sie gerade verwenden möchten. Es kann nur jeweils ein Smartphone zurzeit mit dem Talker verbunden sein.

Eine Verbindung trennen können Sie mit der Funktion „Trennen“. Der Accent fragt: „Kopplung trennen mit welchem Gerät?“. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie trennen möchten.

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint im Statusfenster des Talkers das Symbol



eines Mobilgeräts nebst Anzeige der Signalstärke und des Akkustands:

## Nutzung des Telefons

Sie können wählen, ob Sie das verbundene Telefon nur zum Telefonieren nutzen wollen oder auch zum Versand und Empfang von Textnachrichten (SMS).

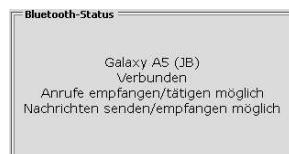
Um die Art der Nutzung festzulegen, wählen Sie im Talker im Menü SYSTEM die Option „Hardware-Tests“ und öffnen das Menü „Telefonkonfiguration“.



**Telefon nutzen für: Anrufe.** In diesem Fall steht die SMS-Funktionalität nicht zur Verfügung. Nutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine SMS empfangen und/oder verschicken möchten oder wenn Sie kein Android-Smartphone benutzen. Der Verbindungszustand wird so im Bluetooth-Statusfenster angezeigt:



**Telefon nutzen für: Anrufe & Nachrichten.** In diesem Fall steht zusätzlich die SMS-Funktionalität zur Verfügung. Der Verbindungszustand wird so im Bluetooth-Statusfenster angezeigt:



## Telefonieren mit dem Accent

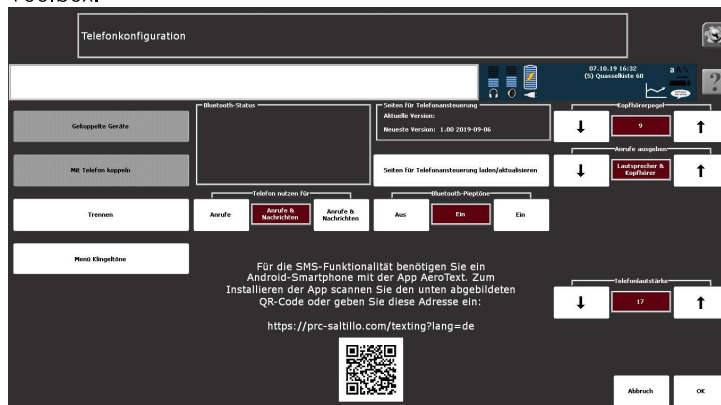
Um das Mobilgerät steuern zu können, stehen in NuVoice die folgenden einfügbaren Befehle zur Verfügung.

### Telefon Anruf annehmen/beenden

Der Befehl „Telefon Anruf annehmen/beenden“ wird benötigt, um einen eingehenden Anruf auf dem Talker anzunehmen. Mit derselben Taste wird das Gespräch auch wieder beendet. Dieser Befehl ist sehr wichtig und sollte schnell erreichbar sein.

### Telefon-Konfiguration

Der Befehl „Telefon-Konfiguration“ öffnet die Seite Telefonkonfiguration in der Toolbox.



### Telefon Kontakte anzeigen

Der Befehl „Telefon Kontakte anzeigen“ öffnet die Seite zum Anzeigen der auf dem Telefon vorhandenen Kontakte.

### Telefon Kontakt hinzufügen

Der Befehl „Telefon Kontakte anzeigen“ öffnet die Seite zum Anzeigen der auf dem Telefon vorhandenen Kontakte

### Telefon Nachrichten anzeigen

Der Befehl „Telefon Nachrichten anzeigen“ öffnet die Seite zum Anzeigen der auf dem Telefon vorhandenen Nachrichten.

### Telefon Nummer wählen

Der Befehl „Telefon Nummer anzeigen“ wählt die beim Speichern des Befehls eingegebene Telefonnummer.

### Telefon SMS senden

Der Befehl „Telefon SMS senden“ schickt den Inhalt des Textfensters an die beim Speichern des Befehls eingegebene Telefonnummer.

### Telefon trennen

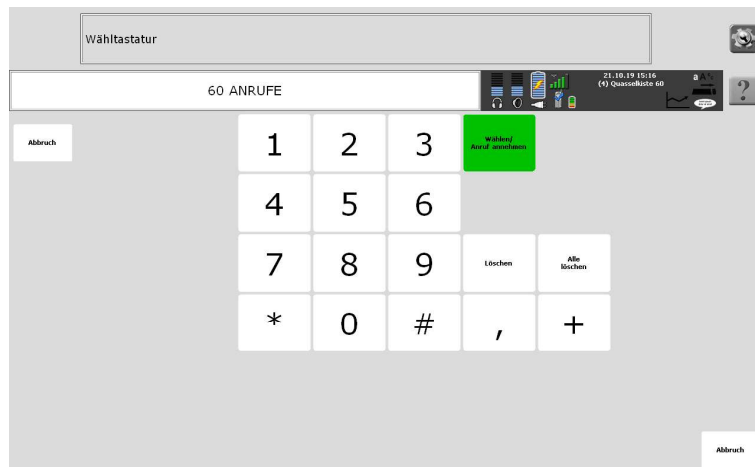
Der Befehl „Telefon trennen“ trennt das gerade verbundene Telefon.

### Telefon verbinden

Der Befehl „Telefon verbinden“ verbindet den Accent mit dem zuletzt verbundenen Telefon.


## Telefon Wähltastatur

Der Befehl „Telefon Wähltastatur“ öffnet eine Seite mit Tasten zum Wählen, Annehmen und Beenden von Gesprächen.



Wenn Sie die SMS-Funktionalität aktivieren, werden Sie gefragt, ob Sie Seiten  
Im Talker stehen weiterhin vorbereitete Seiten für die Nutzung des Smartphones zur Verfügung. Sofern Sie ein Wortschatzprogramm mit 36, 45, 60 oder 84 Feldern verwenden, bietet NuVoice automatisch eine passende Satz Seiten an.

## Seite Nachrichten

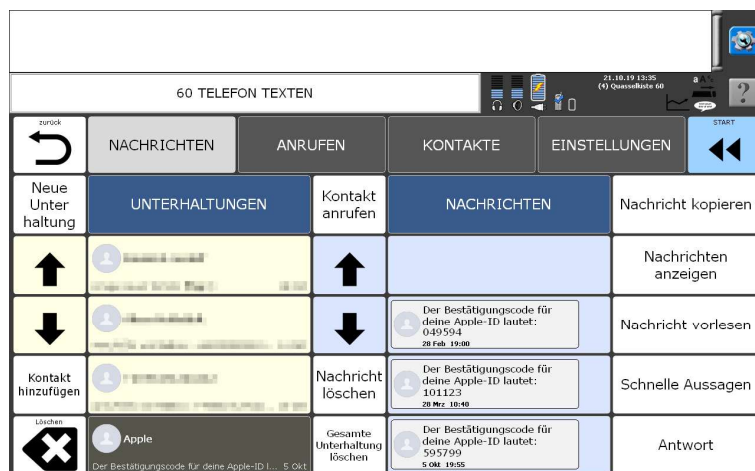

Die Seite zeigt im linken Bereich Ihre Unterhaltungen und im rechten Bereich die zugehörigen Nachrichten. Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um die zugehörigen Nachrichten (Chatverlauf) angezeigt zu bekommen. Wählen Sie die gewünschte Aktion über die Tasten.

## Seite Schnelle Aussagen

60 TELEFON SCHNELLE AUSSAGEN									
zurück	TASTATUR	Hallo!	Hallo, hier ist	Könnte ich bitte sprechen mit	Wie geht es dir?	ja	nein		START
		Ich spreche mit einer Kommunikationsfähre, bitte legen Sie nach auf	Bitte geben Sie mir etwas Zeit zum Formulieren.	Was hast du vor?	bitte	danke	nein danke		
		Wie geht es der Familie?	Gibt es was Neues?	Noch was?	gut	okay	schlecht		
		nicht so viel	war beschäftigt	tschüss	Ich muss jetzt los.	Es war schön mit dir zu sprechen.	Danke für den Anruf.		
		Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.	Bis bald.	Ich liebe dich.	Ruf mich an!	Schick mir eine SMS.	LO L		
Löschen		Zurück rufen...	Grüß ihn von mir.	Grüß sie von mir.	Meine Telefonnummer ist...	O M G	.		

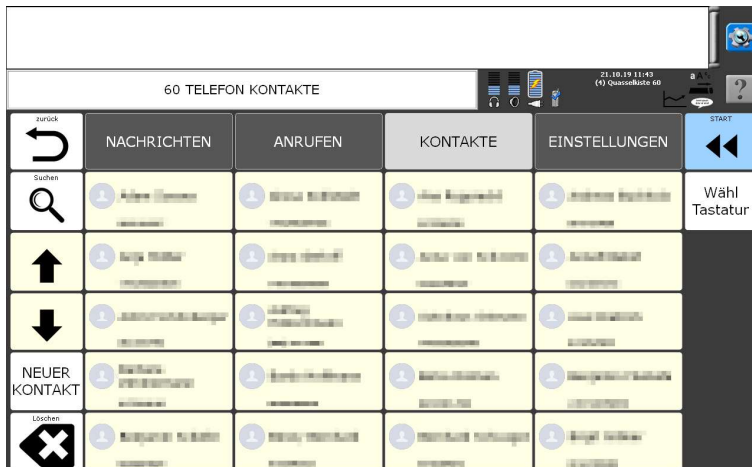
Die Seite bietet Zugang zu beim Telefonieren häufig benötigten Aussagen.

## Seite Anrufen


60 ANRUF									
zurück	NACHRICHTEN	ANRUFEN	KONTAKTE	EINSTELLUNGEN	START				
Suchen	KONTAKTE								Wähl Tastatur
↑	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789
↓	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789
Löschen	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Adrian G... 123456789	Anruf beenden

Die Seite zeigt Ihre auf dem Smartphone/Handy vorhandenen Kontakte in alphabetischer Reihenfolge. Tippen Sie auf einen Kontakt, um die zugehörige Person anzurufen. Wählen Sie „Wähltastatur“, wenn die Person, die Sie anrufen möchten, nicht unter Ihren Kontakten gespeichert ist.

## Seite Kontakte



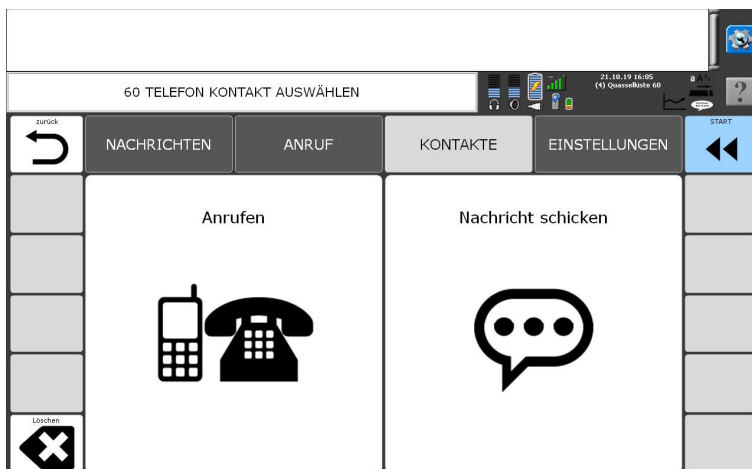Die Seite zeigt Ihre auf dem Smartphone/Handy vorhandenen Kontakte in alphabetischer Reihenfolge. Tippen Sie auf einen Kontakt, um die zugehörige Person anzurufen oder ihr eine Textnachricht (SMS) zu senden, und wählen Sie die gewünschte Aktion aus:



Wählen Sie „Neuer Kontakt“, um einen neuen Kontakt anzulegen. Wählen Sie „Wahl-tastatur“, wenn die Person, die Sie anrufen möchten, nicht unter Ihren Kontakten gespeichert ist.

Die Seite zeigt im linken Bereich Ihre Unterhaltungen und im rechten Bereich die zugehörigen Nachrichten. Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um die zugehörigen Nachrichten (Chatverlauf) angezeigt zu bekommen.

## Seite Einstellungen



Die Seite bietet Zugang zu häufig benötigten Funktionen wie Lautstärke erhöhen/verringern, Mikrofon stummschalten, Stummschaltung aufheben, Verbinden/Verbindung trennen und Kopplung löschen. Weiterhin haben Sie hier Zugang zur Seite „Telefonkonfiguration“.



## Textnachrichten (SMS) senden und empfangen

### App „AeroText“ auf dem Smartphone installieren

Die App ist nicht im Google-Play-Store erhältlich. Sie müssen die Datei „AeroText.apk“ von der PRC-Salttillo-Seite herunterladen, auf das Smartphone kopieren und manuell installieren. Am leichtesten ist dies, wenn Sie die Datei direkt mit dem Smartphone herunterladen. Geben Sie diese Adresse in den Browser ein:

<https://www.prc-salttillo.com/texting?lang=de>

oder scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone, um zur selben Seite zu gelangen:



Akzeptieren Sie die Endkundenvereinbarung und tippen Sie auf „Download AeroText“.

### AeroText

Download AeroText

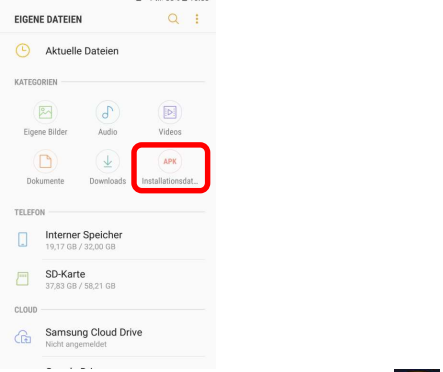
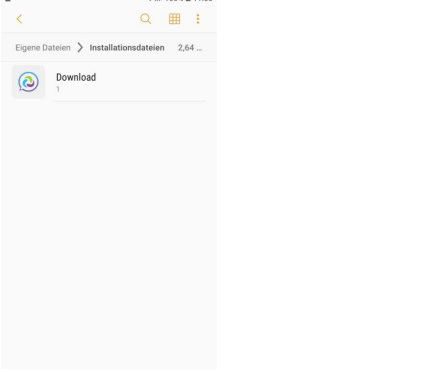

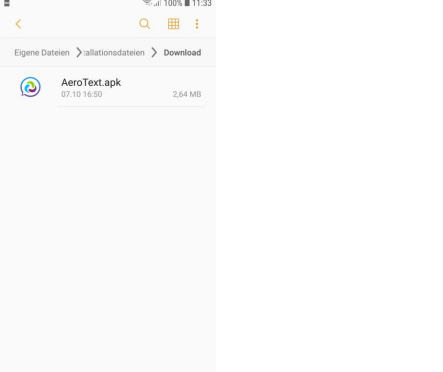

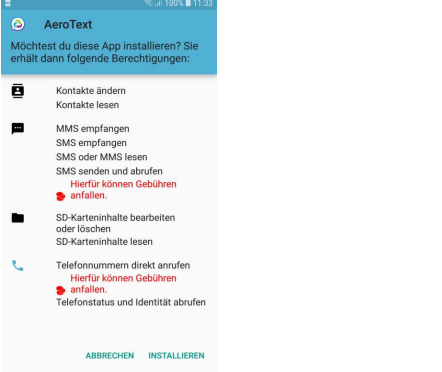
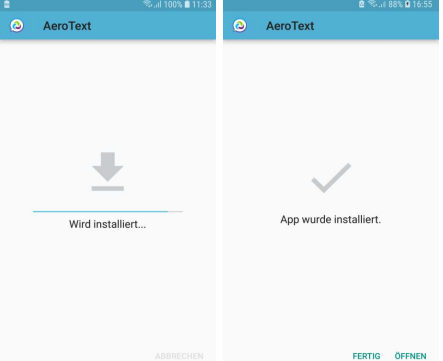
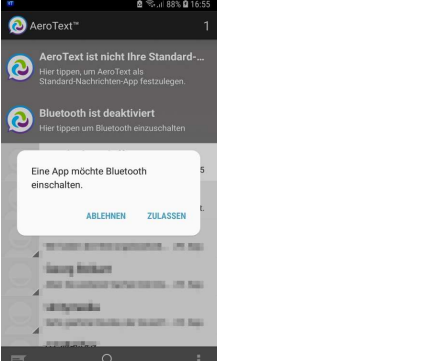
I agree to the [End User License Agreement](#)

 Download AeroText

Stellen Sie sicher, dass die Installation von Apps aus externen Quellen in den Sicherheitseinstellungen Ihres Android-Smartphones zugelassen ist. Wie dies geht, hängt von Ihrem Smartphone und der Android-Version ab. Ab Android 8 ist dies i.d.R. innerhalb der Rechte der App geregelt, die benutzt wird, um die APK-Datei zu öffnen.

Öffnen Sie einen Dateimanager wie „Eigene Dateien“ von Samsung. Haben Sie keinen Dateimanager auf Ihrem Smartphone, installieren Sie einen kostenlosen Dateimanager wie z.B. „OI Dateimanager“ aus dem Google-Play-Store. Navigieren Sie zu dem Ordner, in den Sie die Datei „AeroText.apk“ gespeichert haben, und tippen Sie auf die App.

In der folgenden Beschreibung wird AeroText mit der App „Eigene Dateien“ von Samsung installiert.

 <p>1. Öffnen Sie die App „Eigene Dateien“. Tippen Sie auf „APK“.</p>	 <p>2. Tippen Sie auf .</p>
 <p>3. Tippen Sie erneut auf .</p>	 <p>4. Wählen Sie „INSTALLIEREN“.</p>
 <p>5. Die App wird installiert. Tippen Sie auf „ÖFFNEN“.</p>	 <p>6. Lassen Sie zu, dass AeroText Bluetooth aktiviert. Machen Sie AeroText zur Standardanwendung für Nachrichten.</p>

## Kontakte sichern

Sie können die im Talker angelegten Kontakte (Namen und Telefonnummern) in einer Datei sichern.

1. Schließen Sie ein Speichermedium (USB-Stick, SD-Card) an.
2. Öffnen Sie das Menü **SPEICHERÜBERTRAGUNG**.
3. Wählen Sie „**Kontakte sichern**“.
4. Geben Sie einen Dateinamen ein.

## Kontakte laden

Sie können die im Talker zur Verfügung stehenden Kontakte (Namen und Telefonnummern) aus einer Datei laden.

1. Schließen Sie das Speichermedium (USB-Stick, SD-Card) mit der Datei mit den gesicherten Kontakten an.
2. Öffnen Sie das Menü **SPEICHERÜBERTRAGUNG**.
3. Wählen Sie „**Kontakte laden**“.